


INSTRUCCIONES DE USO


XHANCE® (ex hans)
(propionato de fluticasona)
spray nasal, 93 mcg

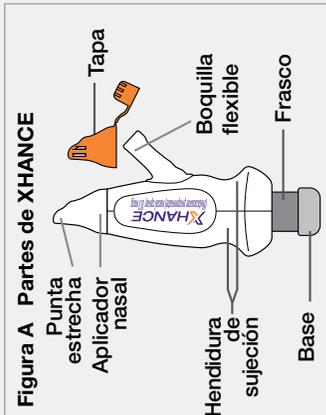



Lea estas Instrucciones de uso antes de empezar a usar XHANCE y cada vez que obtenga un repuesto. Puede haber nueva información. Esta información no sustituye la consulta con su profesional de la salud sobre su enfermedad o tratamiento. Si tiene alguna duda sobre XHANCE, consulte a su profesional de la salud o farmacéutico.

Información importante sobre XHANCE

- XHANCE es para usar en la nariz únicamente. No rocíe en los ojos ni en la boca.
- XHANCE le administra su dosis de medicamento en la nariz cuando usted **presiona el frasco mientras sopla** en la boquilla flexible (ver Figura B).
- No comparta XHANCE con otras personas.
- Agite XHANCE antes de cada uso.
- No obstruya la segunda fosa nasal mientras sopla.
- No coloque los dedos sobre la boquilla flexible o por encima de esta.
- El frasco de XHANCE está hecho de vidrio. No retire la base del frasco.

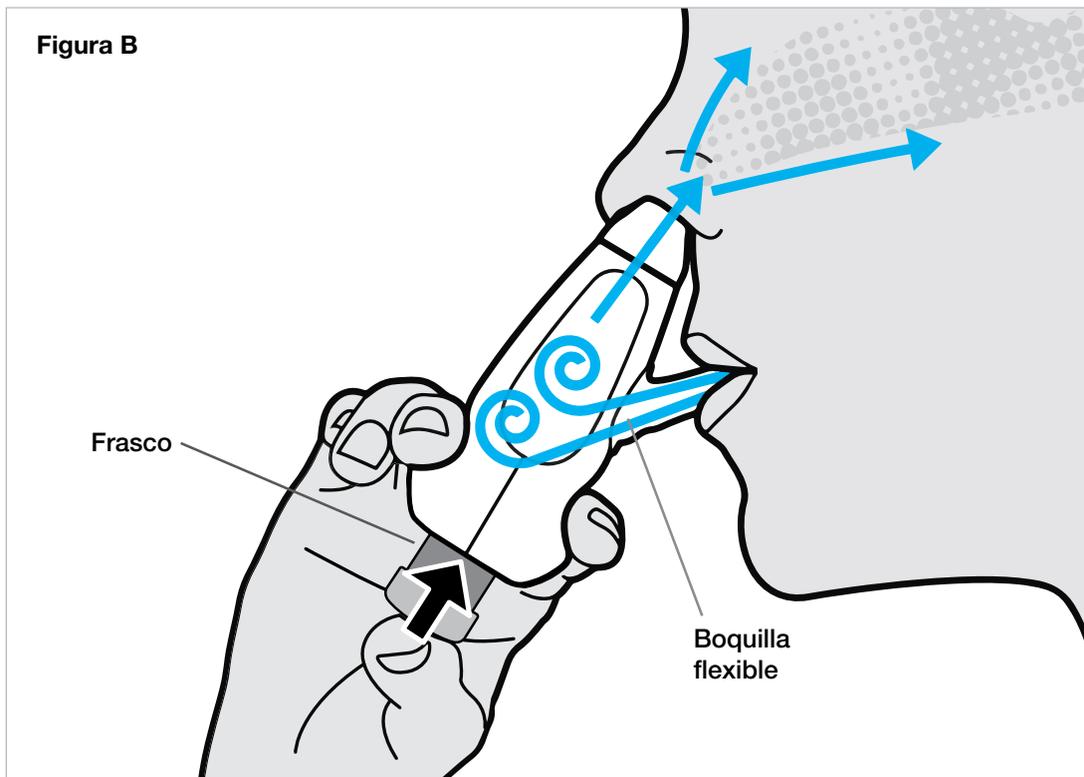

Prepare XHANCE antes del primer uso

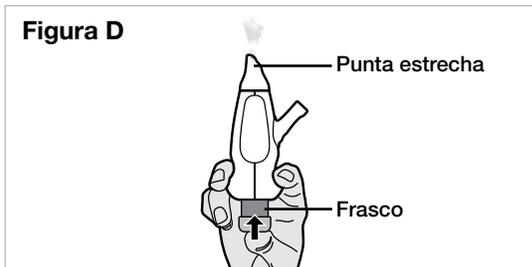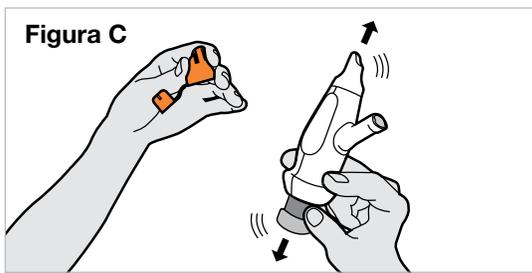

Preparación de XHANCE:



Paso 1: Retire la tapa (ver Figura C).

Paso 2: Agite XHANCE.

Paso 3: Pulse el frasco 7 veces o hasta que vea un rocío fino (ver Figura D). Mantenga la punta estrecha de XHANCE alejada de la cara mientras realiza la preparación. Cuando vea un fino rocío de medicamento, XHANCE está listo para usar.

Importante: Si no ha usado XHANCE por 7 días o más, vuelva a prepararlo rociando 2 veces lejos de la cara.

Pasos para utilizar XHANCE después de la preparación

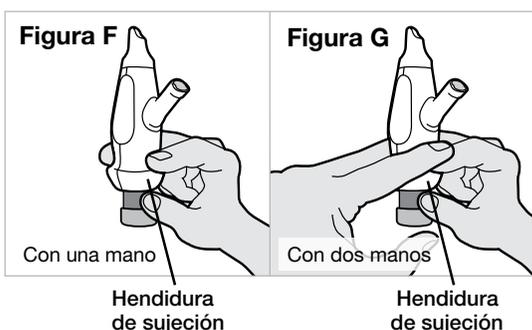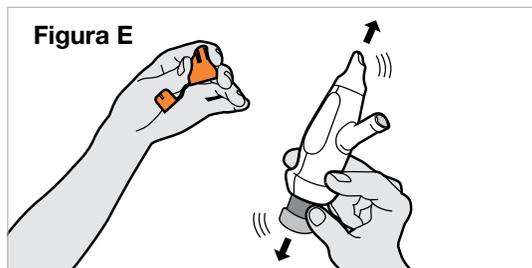

Paso 1: Retire la tapa.

Paso 2: Agite XHANCE (ver Figura E).

Paso 3: Sujete XHANCE colocando los dedos en la hendidura de sujeción situada debajo de la boquilla flexible. Puede utilizar 1 mano (ver figura F) o 2 manos (ver figura G) para sujetar XHANCE.

No coloque los dedos sobre la boquilla flexible o por encima de esta.

Los pasos continúan en el otro lado

Pasos para utilizar XHANCE después de la preparación (continuación)

Figura H

Aplicador nasal

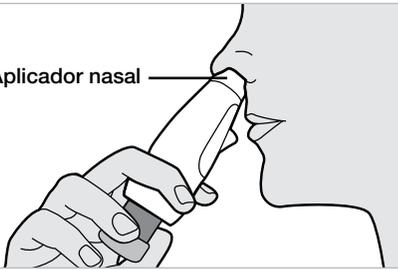


Figura I

Boquilla flexible

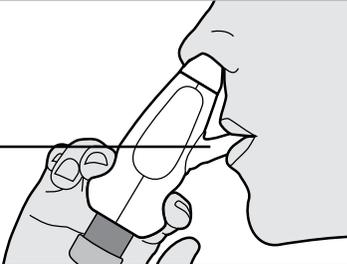


Figura J

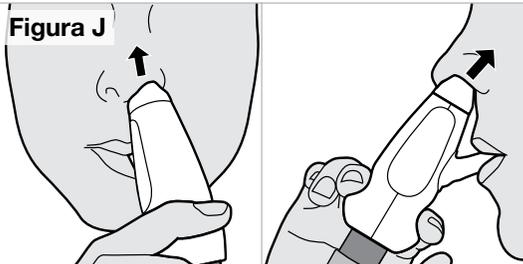


Figura K

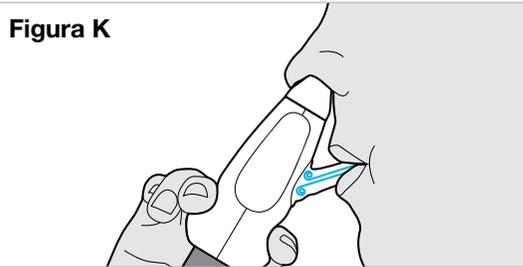


Figura L


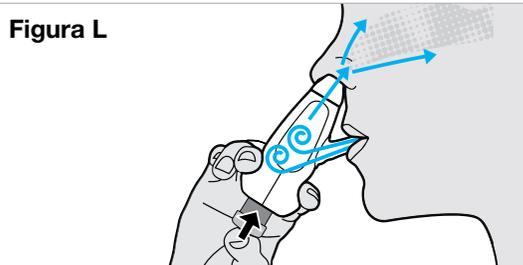


Figura M

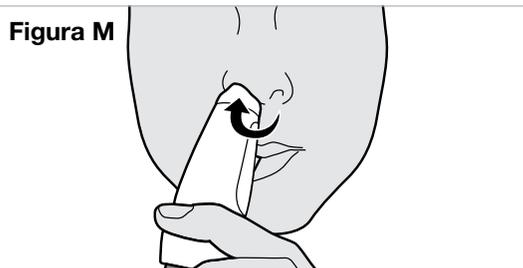

Paso 4: Introduzca suavemente el aplicador nasal en la fosa nasal. Mientras sujeta XHANCE en la hendidura de sujeción situada debajo de la boquilla flexible, introduzca el aplicador nasal en 1 fosa nasal hasta donde le resulte cómodo (**ver Figura H**). Esto ayuda a mantener un sellado hermético entre el aplicador nasal y la fosa nasal.

Importante: Mantenga un sellado hermético entre el aplicador nasal y la fosa nasal.

Paso 5: Introduzca la boquilla flexible en la boca, mientras mantiene el aplicador nasal en la fosa nasal (ver Figura I). Asegúrese de que la boquilla flexible esté bien sujeta en la boca y de que el aplicador nasal permanezca sellado en la fosa nasal durante su uso.

Nota: Puede doblar la boquilla flexible hacia arriba y hacia abajo para introducirla en la boca mientras mantiene el aplicador nasal en el orificio nasal.

Paso 6: Apunte el aparato hacia arriba. Esto ayudará a que el medicamento penetre profundamente en la fosa nasal (**ver Figura J**).

Nota: Puede utilizar un espejo para ayudarle a apuntar el aparato hacia arriba.

Paso 7: Sople con fuerza en la boquilla flexible como si estuviera inflando un globo (ver Figura K).

No intente inspirar por la nariz ni aspirar mientras sopla en la boquilla flexible.

No cierre ni obstruya la otra fosa nasal. Esto podría impedir que el aire que sopla en la boquilla flexible salga por la otra fosa nasal.

Paso 8: Sin dejar de soplar con fuerza en la boquilla flexible, presione con el pulgar el frasco para introducir el medicamento en la fosa nasal (ver Figura L).

Paso 9: Repita los pasos 2 a 8 de los “Pasos para utilizar XHANCE después de la preparación” para administrar el medicamento en la otra fosa nasal (**ver Figura M**).

¿Lo he hecho bien?

- ✓ Agite antes de cada uso.
- ✓ Mantenga un ajuste perfecto en nariz y boca.
- ✓ Siga soplando con fuerza mientras presiona el frasco.
- ✓ No aspire, inhale ni obstruya la segunda fosa nasal.
- ✓ Administre solo la cantidad recetada de pulverizaciones en cada fosa nasal.

XHANCE
(propionato de fluticasona) spray nasal, 93 mcg

Para obtener más información, visite www.XHANCE.com o llame al 1.833.678.6673

Limpieza y cuidado de XHANCE

- No es necesario limpiar XHANCE. Si prefiere limpiar el aparato, retire la tapa y utilice un paño limpio, seco y sin pelusas para limpiarlo después de cada uso.
- Vuelva a colocar la tapa y guarde XHANCE en un lugar limpio y seco.
- El frasco de XHANCE está hecho de vidrio. No retire la base del frasco. Si se le cae accidentalmente XHANCE, compruebe que no esté dañado. No utilice el producto si el aparato está dañado o tiene el vidrio roto. Si está dañado, llame al 1.833.678.6673.

¿Cómo debo almacenar XHANCE?

- Almacene XHANCE a temperatura ambiente entre 59 °F y 77 °F (15 °C y 25 °C).
- Proteja a XHANCE del calor, el frío y la luz extremos.
- Deseche XHANCE después de usar 120 atomizaciones después de la preparación inicial. Aunque el frasco no esté completamente vacío, es posible que no reciba la dosis correcta del medicamento si continúa usándolo.

Mantenga XHANCE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Distribuido por OptiNose US, Inc.
XHANCE y OPTINOSE son marcas comerciales registradas de OptiNose, Inc.
©2024 OptiNose US, Inc. Todos los derechos reservados.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

Revisada: 03/2024 XHA-24-10112